

Cuadro de especificaciones

Modelo	PO5			
Volumen del pulso	1	220ml (±15%)	4	880ml(±15%)
	2	440ml(±15%)	5	1000ml(±15%)
	3	660ml(±15%)		
Dimensiones	188mmx98mmx208mm			
Peso	2.0kg (con batería)			
Pantalla	2.8"			
Modo	Pulso, respaldo, continuo			
Concentración de oxígeno	93±3%			
Calentamiento	2 minutos			
Duración de la batería	BAT-01: 1	360mins	BAT-02: 1	720mins
	2	195mins	2	390mins
	3	170mins	3	340mins
	4	150mins	4	300mins
	5	120mins	5	240mins
Tiempo de Carga	BAT-01: 2.5 horas BAT-02: 5 horas			
Condiciones de operación	Temperatura 5°C -40°C Humedad relativa: 35%-93% (sin condensación)			
Condiciones de almacenaje	Temperatura-20°C-55°C Humedad relativa 10%-93% (sin-condensación)			

SHENYANG RMS MEDICAL TECH CO., LTD
Dir: NO. 10—4, CALLE JINHUI, DISTRITO DE HUNNAN, SHENYANG.
TEL:024—31682686
E-MAIL: luigi@rms-care.com roberto@rms-care.com

RESPIRCare

Concentrador de oxígeno portátil PO5




SHENYANG RMS MEDICAL TECH CO., LTD

CONCENTRADOR DE OXIGENO PORTATIL P05




El P05 cuenta con tecnología Respircare-Pulse y proporciona breves bocanadas de oxígeno sincronizadas con la respiración, lo que permite a las personas inhalar oxígeno fresco durante la inspiración sin desperdiciar oxígeno. Ajustar el volumen del pulso para cada respiración en función de la frecuencia respiratoria del usuario. Esto significa que, independientemente de la frecuencia respiratoria del paciente en cualquier configuración determinada, se proporciona la misma cantidad de oxígeno por minuto.

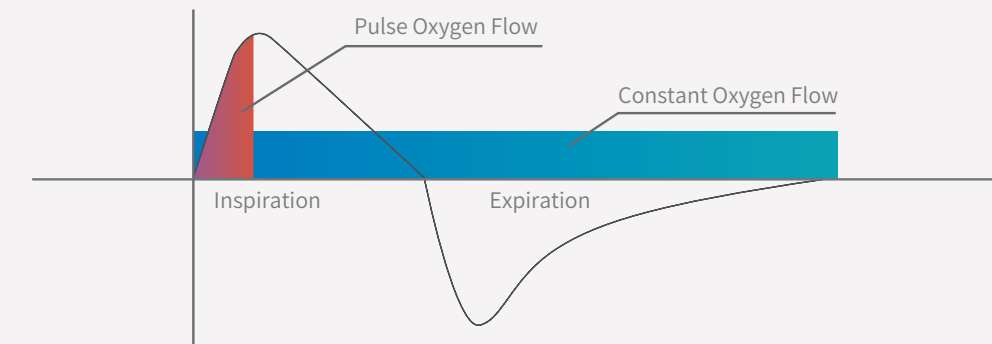


Diferencia entre flujo de oxígeno pulsado y flujo de oxígeno continuo

Ajustable en 3 configuraciones de pulso y hasta 1000 ml de oxígeno para satisfacer la demanda de respiración, salida estable de $93 \pm 3\%$ de aire enriquecido con oxígeno.

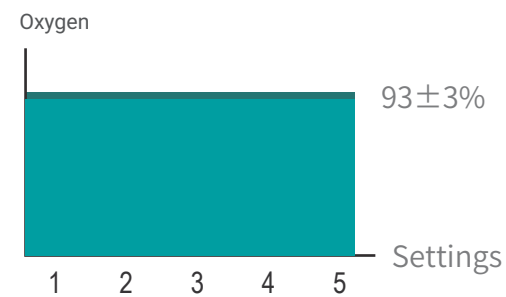

Modo continuo de respaldo, P05 suministra automáticamente un flujo de oxígeno continuo (1000 ml/min) mientras no se detecta respiración en 30 segundos.

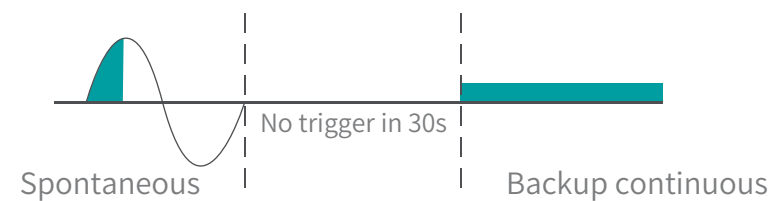

Su diseño liviano y compacto lo convierte en la mejor opción para viajar. (con solo 20.8 cm de altura y 2 kg)



Batería opcional, hasta 6 horas de funcionamiento con BAT-01 y 12 horas con BAT-02



El tamiz molecular eficiente, reemplazable por el usuario, produce oxígeno de grado médico de alta pureza.



► Embalado en la caja, viene mochila impermeable y cómoda como regalo

